


AssistUK TouchTo

Touch-Zugang lernen – 197 Aktivitäten in 7 Stufen, mit Kalibrierung und Verlauf.

Anleitung für den Browser (Computer, Tablet, Smartphone) · Fassung 1 · Stand August 2026

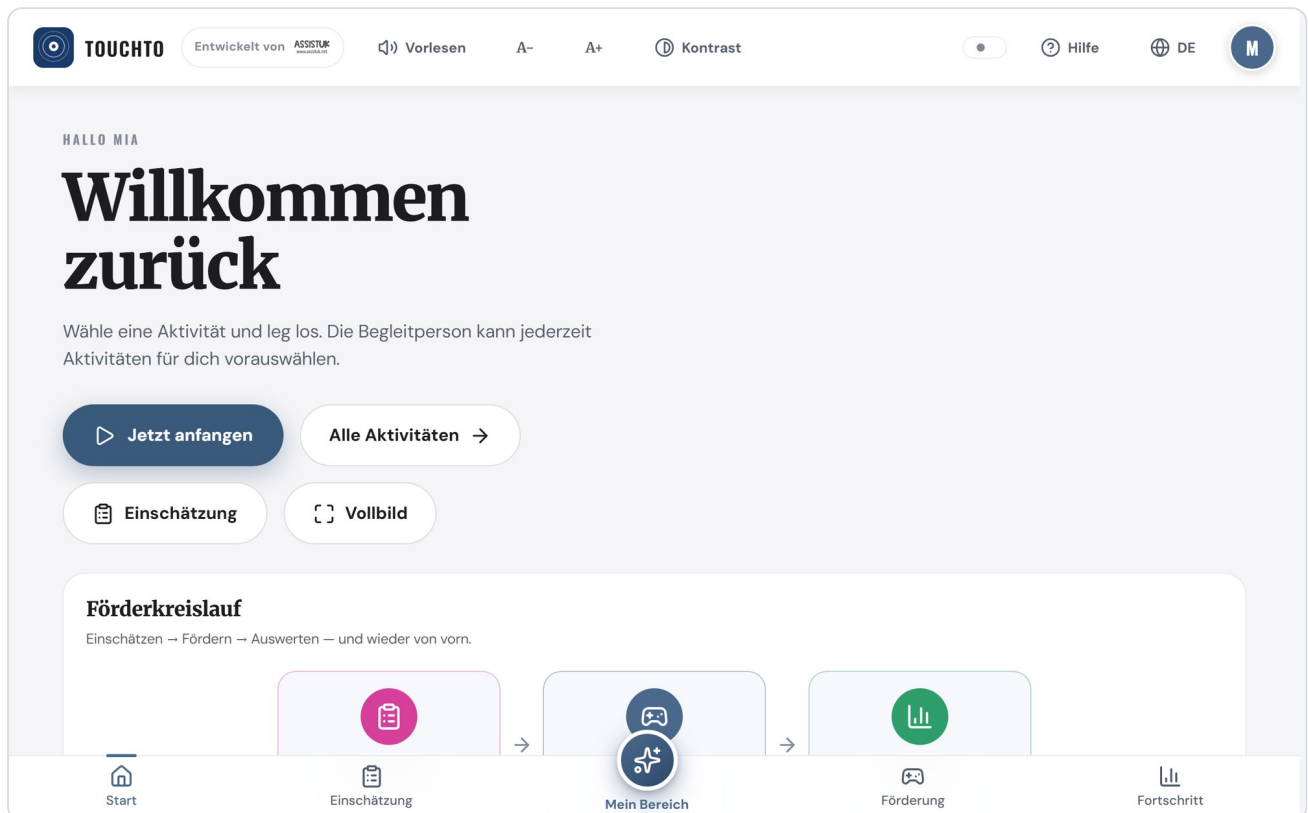

INHALT

Was TouchTo ist	3
Was Sie brauchen	3
TouchTo starten	4
Die sieben Stufen	6
Touch passend einstellen	7
Die Touch-Kalibrierung	7
Einschätzung und Verlauf	9
Szenenbilder: die Schwester-App SceneTalk	10
Daten und Sicherung	11
Wenn etwas nicht funktioniert	12
Hilfe und Kontakt	13
Mehr erfahren	14

WAS TOUCHTO IST

TouchTo ist das Touch-Schwesterprojekt von GazeTo: eine kostenlose Browser-App für Menschen, die einen Touchscreen direkt mit Hand oder Finger bedienen – ohne Augensteuerung, ohne zusätzliche Geräte. Für viele Menschen auf dem Weg in die Unterstützte Kommunikation (UK) ist der Touchscreen der erste Zugang; TouchTo macht daraus einen gangbaren Lernweg.

Grundlage ist derselbe Kompetenzaufbau in **sieben Stufen** wie bei GazeTo, mit **197 Aktivitäten** – nur konsequent auf die Touch-Bedienung ausgerichtet: große Zielflächen, spürbares Feedback, wählbare Aktivierungsarten.

Kurz gesagt. TouchTo macht aus „Tippen üben“ einen Weg mit sieben Stufen – vom ersten Berühren bis zu Spielen und Kommunikationsaktivitäten.

TouchTo läuft im Browser, funktioniert nach dem ersten Laden auch ohne Internet und verwaltet mehrere Nutzerprofile mit Foto. Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Die Oberfläche gibt es in 101 Sprachen.

Was Sie brauchen


Gerät	Tablet oder Touchscreen-Gerät mit aktuellem Browser (iPad, Android, Windows-Touch)
Adresse	touchto.assistuk-apps.net
Kosten	keine – ohne Konto, ohne Anmeldung

TOUCHTO STARTEN

Beim ersten Start begrüßt TouchTo Sie mit einer Einführung in vier Schritten: Sprache wählen, Funktionen kennenlernen, Profil anlegen. Weitere Profile können jederzeit dazukommen – bei mehreren Profilen fragt TouchTo beim Start, wer übt.



Schritt 1 von 4: Sprache wählen – die Oberfläche gibt es in 101 Sprachen

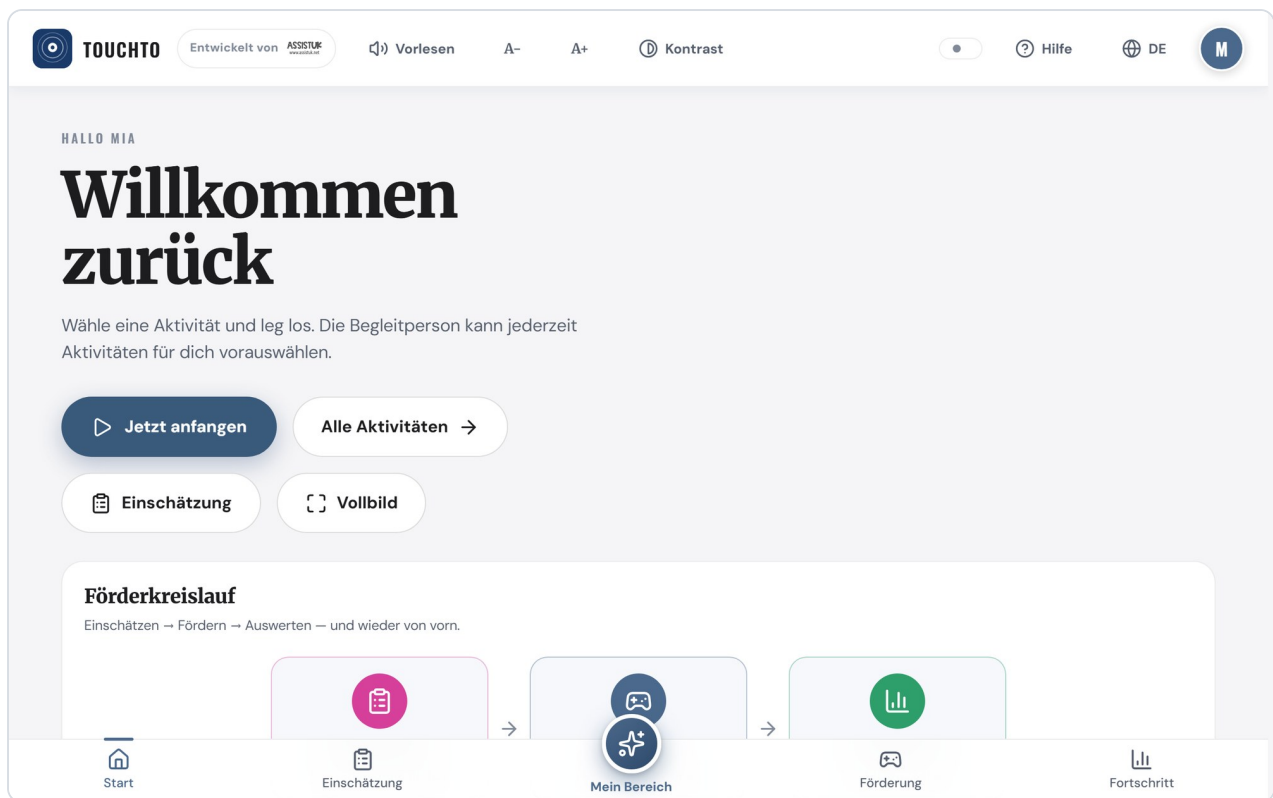

Die Startseite: Jetzt anfangen, Alle Aktivitäten, Einschätzung – unten der Förderkreislauf

Bereiche schützen. Eine vierstellige PIN kann die Begleit-Bereiche schützen – so bleibt die übende Person in ihrem Bereich, ohne versehentlich Einstellungen zu ändern.

DIE SIEBEN STUFEN

Stufe	Name	Worum es geht
1	Entdecken	Jede Berührung löst sichtbar etwas aus. Keine Zielgenauigkeit nötig.
2	Erkunden	Den Bildschirm aktiv erkunden; große Bereiche treffen.
3	Finden	Bestimmte Ziele finden – auch bewegliche.
4	Wählen	Aus mehreren Möglichkeiten bewusst eine auswählen.
5	Steuern	Kleinere Felder in Rasteranordnung – wie auf einer Kommunikationstafel.
6	Anwenden	Mehrschrittige Aufgaben, Navigation, räumliche Orientierung.
7	Meistern	Spiele gegen den Computer und Kommunikationsaktivitäten.

TOUCHTO Entwickelt von ASSISTUK

Vorlesen A- A+ Kontrast Hilfe DE M

FÖRDERUNG

197 Aktivitäten über 7 Stufen.

Stöbere durch alle Aktivitäten nach Stufe. Jede Stufe baut auf der vorherigen auf – wähle oben eine Stufe oder entdecke alle.

Szenenbilder gibt es in SceneTalk
Echte Fotos mit sprechenden Stellen – erstellen und nutzen in SceneTalk, der kostenlosen Schwester-App.

ZIELGRUPPE

- Alle
- Kind
- Teenager
- Erwachsene
- Senioren

Stufen


- Alle (197)
- Stufe 1 · Entdecken (34)
- Stufe 2 · Erkunden (36)
- Stufe 3 · Finden (29)
- Stufe 4 · Wählen (38)
- Stufe 5 · Steuern (26)
- Stufe 6 · Anwenden (18)
- Stufe 7 · Meistern (16)

Start **Einschätzung** **Mein Bereich** **Förderung** **Fortschritt**

Alle 197 Aktivitäten, gefiltert nach Stufe und Zielgruppe – von Kind bis Senior:in

TOUCH PASSEND EINSTELLEN

Der Touch-Zugang wird erst dann verlässlich, wenn er zur Person passt. TouchTo bringt dafür eigene Stellschrauben mit:

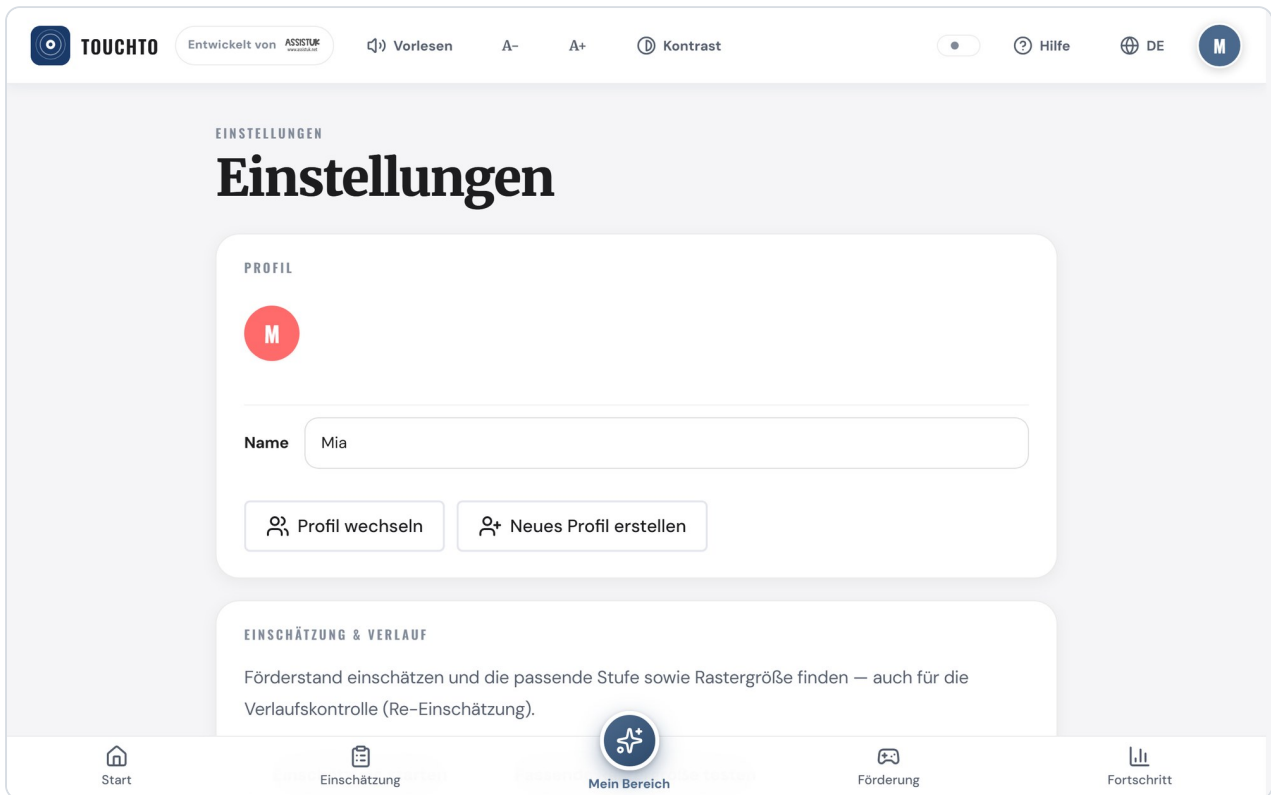


Einstellungen: Profil, Einschätzung & Verlauf – darunter Eingabe, Darstellung und Ton

- **Aktivierungsart:** Tippen (sofort), langes Drücken oder Touch-Verweilen – je nachdem, was motorisch sicher gelingt.
- **Mindest-Zielgröße:** wie groß Ziele mindestens sein müssen, damit sie sicher getroffen werden.
- **Spürbares Feedback:** Vibration bei der Auswahl (auf Geräten, die das können).
- **Fehlertreffer-Analyse:** TouchTo zeichnet anonym auf, wo Berührungen daneben gingen – die Touch-Variante der Blick-Heatmap.

Die Touch-Kalibrierung

Wenn der Finger systematisch neben dem Ziel landet – etwa bei Tremor –, gleicht die Kalibrierung das aus: Neun Punkte werden nacheinander angetippt, TouchTo berechnet den Versatz und korrigiert ihn ab dann automatisch.

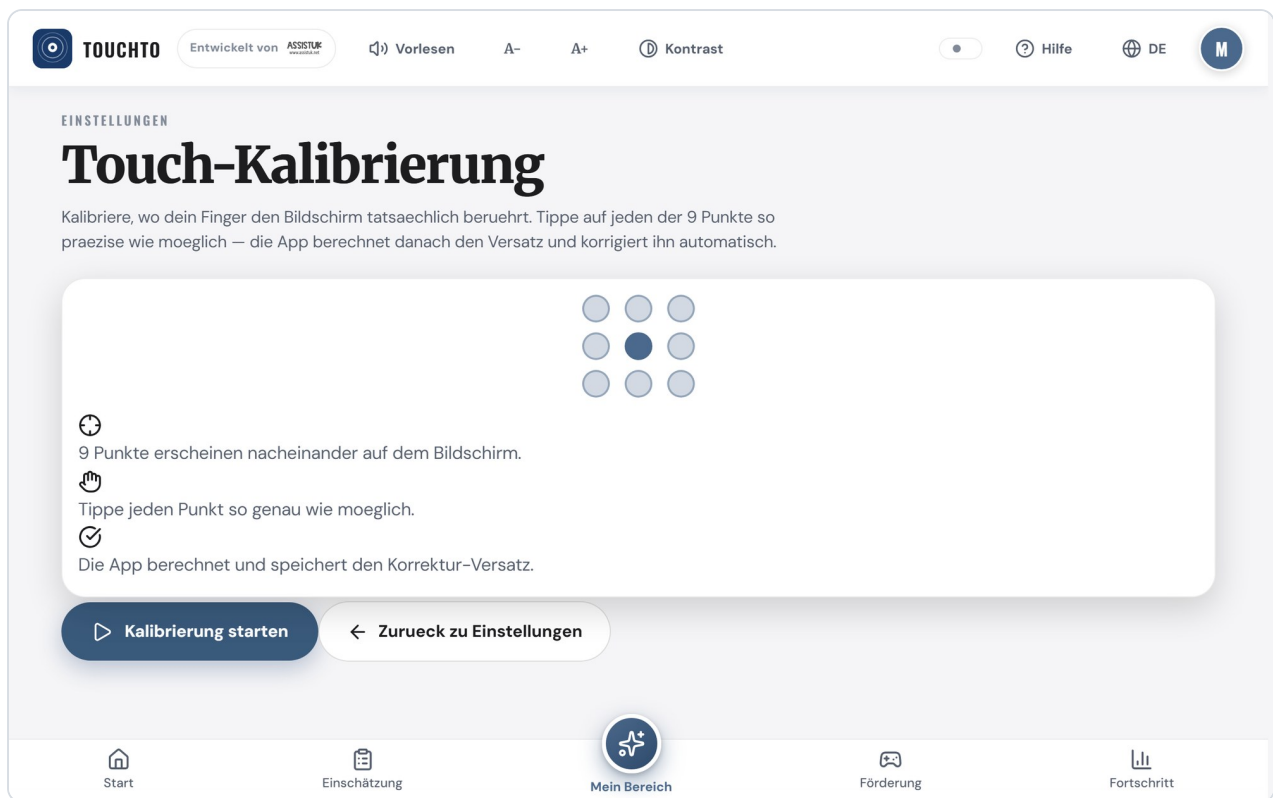

Neun Punkte antippen – TouchTo berechnet den Versatz und speichert die Korrektur

EINSCHÄTZUNG UND VERLAUF

Wie bei GazeTo begleitet TouchTo die Förderung im Kreislauf: einschätzen → fördern → auswerten → neu einschätzen. Die geführte Einschätzung ordnet ein, welche Stufe passt; jede Sitzung wird mit Sternen, Dauer und Trefferbild dokumentiert. Aus dem Fragebogen ergibt sich die DAGG-3-Stufe, und der Bericht verlinkt direkt in den Vokabular-Finder auf assistuk.net. Die Einschätzung ist eine strukturierte Beobachtung für die Förderplanung; sie ersetzt keine umfassende UK-Diagnostik.

SZENENBILDER: DIE SCHWESTER-APP SCENETALK

Szenenbilder – echte Fotos mit sprechenden Stellen – leben in der Schwester-App **SceneTalk**. Dort entstehen eigene Szenen mit eigenen Fotos und vertrauten Stimmen; TouchTo verweist an den passenden Stellen direkt hinüber.

DATEN UND SICHERUNG

Alle Profile, Sitzungen und Einstellungen liegen ausschließlich auf dem Gerät – nichts wird übertragen. Sicherungen lassen sich als Datei ausgeben und wieder einlesen, auch auf einem anderen Gerät.

WENN ETWAS NICHT FUNKTIONIERT

Beobachtung	Mögliche Ursache	Was hilft
Berührungen lösen doppelt aus	Aktivierungsart zu empfindlich	Auf langes Drücken oder Touch-Verweilen wechseln
Die Person trifft knapp daneben	Systematischer Versatz (z. B. Tremor)	Touch-Kalibrierung durchführen – neun Punkte genügen
Ziele sind zu klein	Mindest-Zielgröße zu niedrig	Mindest-Zielgröße in den Einstellungen erhöhen
Einstellungen wurden verstellt	Begleit-Bereiche ungeschützt	PIN-Schutz in den Einstellungen aktivieren
Fortschritt ist weg	Browserdaten gelöscht oder anderes Gerät	Sicherung einlesen – und künftig regelmäßig sichern
Die App startet ohne Internet nicht	Sie wurde noch nie geladen	Einmal mit Internet öffnen; danach läuft sie offline

HILFE UND KONTAKT

Bedienfragen beantworten wir kostenlos: lars.tiedemann@assistuk.net

TouchTo bringt eine eigene bebilderte Anleitung mit (in der App unter **Hilfe**). Für die Frage, welches Gerät und welche Halterung zu einer Person passen, sind Fachberatung und versorgender Fachbetrieb die richtigen Ansprechpartner.

MEHR ERFAHREN

Mit dem Handy die QR-Codes scannen – oder die Adressen direkt eingeben. Alle Angebote sind kostenlos.



Hilfe & Anleitungen

Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Störungshilfe
und alle Handbücher –
kostenlos.

assistuk.net/hilfe



Guter Gesprächspartner

Wie Gespräche gelingen:
warten können, echte
Fragen stellen, Zeit lassen.

assistuk.net/info/guter-gespraechs-partner



TouchTo im Netz

Die Produktseite:
Neuigkeiten, häufige
Fragen, alle Anleitungen.

assistuk.net/apps/touchto



Kurs: Technik und Zugang

Wie Menschen zu ihrer
Ansteuerung finden –
kostenlos, ohne
Anmeldung.

assistuk.net/hilfe/kurs/technik-und-zugang